

NEC製ER-50・ER-50Aeタイプ


※下図はER-50のものです。

緊急通報装置 取扱説明書

上部側面にリセットスイッチがあります。装置の事で気になる事があるときは押してみてください。

本体
H53. 5xW218xD162(m/m)

ペンダント押しボタン
H67. 5xW42xD14. 5(m/m)

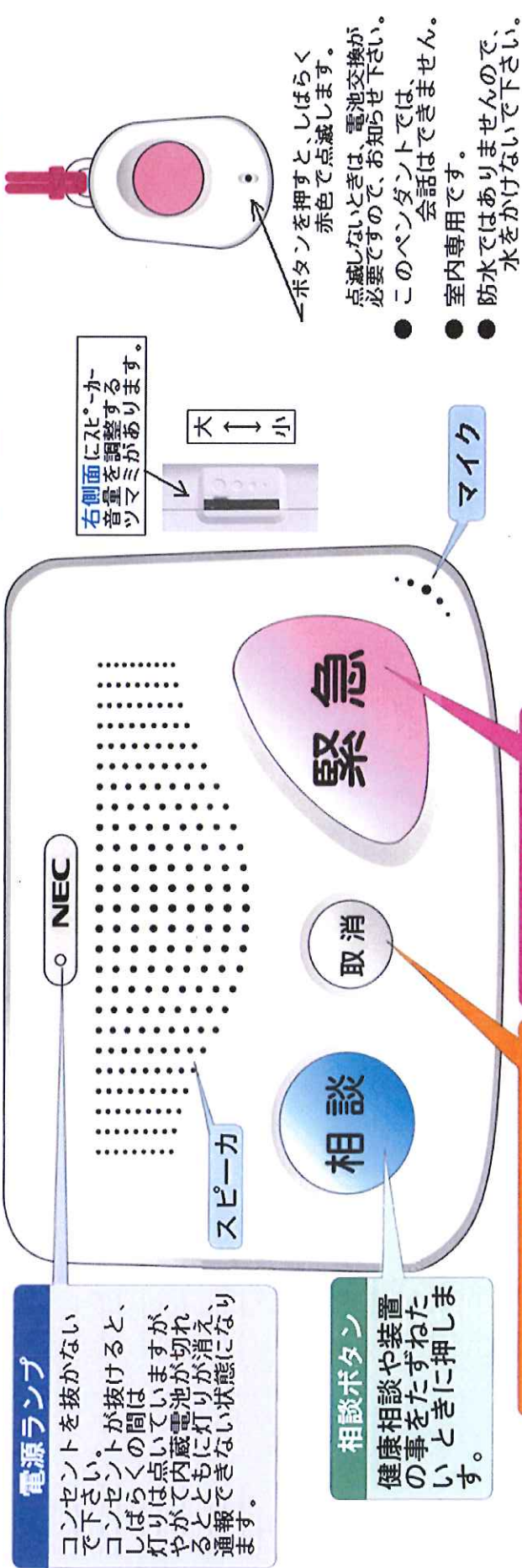

電源ランプ
コンセントを抜かないで下さい。コンセントが抜けると、コンセンの間に点滅しますが、灯りがとると点滅が切れ、通報できなくなります。


相談ボタン
健康相談や装置の事をたずねたいときに押しします。

取消ボタン
まちがえて緊急ボタンなどを押したときに消され、通報が取り消されます。

緊急ボタン
からだの調子が悪いときなどに非常のときに押しします。

ボタンを押すときは、1秒以上押しして下さい。

コンセントが抜けると装置から「停電です」や「電切れです」というアナウンスが流れますので、コンセントを確認して下さい。

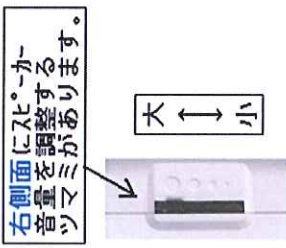

- ボタンを押すと、しばらく赤色で点滅します。点滅しないときは、電池交換が必要です。お知らせ下さい。
- このペンダントでは、会話はできません。
- 室内専用です。
- 防水ではありませんので、水をかけないで下さい。

緊急通報に関するお問い合わせ先

